



Surgical perfection. For life.



Best Surgical Imaging Table


Förkortar operationstider och sänker stråldosen

STILLE imagiQ2 genomlysningsbord markerar en stor milstolpe i utvecklingen av stråldosoptimering och skapar en säkrare miljö för både patient och personal.

Ökar effektiviteten och förkortar operationstiderna

STILLE imagiQ2s™ True Free Float™-teknologi ger full kontroll och rörelsefrihet av bordstoppen i alla riktningar. Lik som en förlängning av kirurgens hand och med en mjuk och taktill känsla, möjliggörs kortare och effektivare operationer.

Den patenterade ISO-ROLL™-tilten ($\pm 15^\circ$) bevarar bildfokus genom hela rörelsen, vilket minskar behovet att ställa om C-bågen samt minskar spridd strålning.

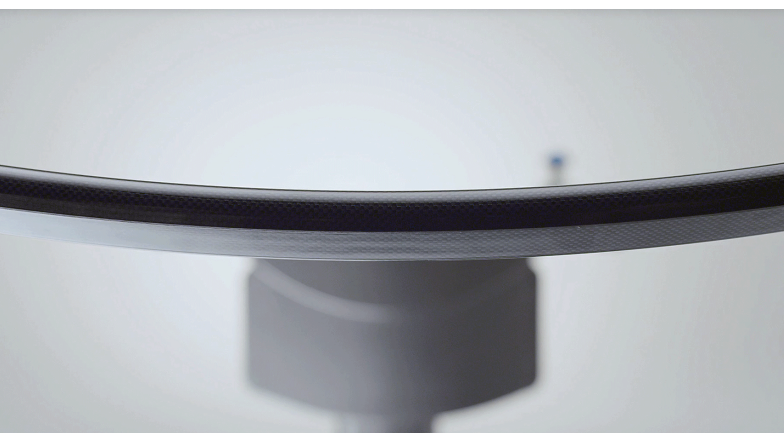

Lågdos-bordstopp med rundade hörn och den högsta genomsläppligheten för röntgenstrålar på marknaden för bord med flytande bordstoppar. Speciellt framtagen för avbildning i sned projektion och för att minimera artefakter och öka bildkvaliteten.



Minskar strålningen och förbättrar bildkvaliteten


Den unika kolfibertoppen har en genomsläpplighet av röntgenstrålar som motsvarar 0,4 mm Al vilket sänker mängden strålning personalen utsätts för vid undersökning med C-båge, utan att kompromissa på bildkvalitet. Bordstoppen har en 60% högre genomsläpplighet för röntgenstrålar jämfört med genomsnittsbordet på marknaden.

Genom dess tunna design, låga bas och unika infällbara hjul för bord med flytande bordstopp, ges C-bågen maximalt med utrymme att arbeta och möjliggör för bilddetektorn att komma närmare patienten vilket reducerar strålningsexponeringen samtidigt som bildkvaliteten höjs.

Välj en Low-Dose Enabler™

Tillsammans utgör True Free Float™-teknologin, kolfibertoppens höga genomsläpplighet av röntgenstrålar och den låga basen en riktig Low-Dose Enabler™, och det ideala komplementet till C-båge i hybridsal eller angiorum.

Läs mer på: www.stille.se/imagiq2

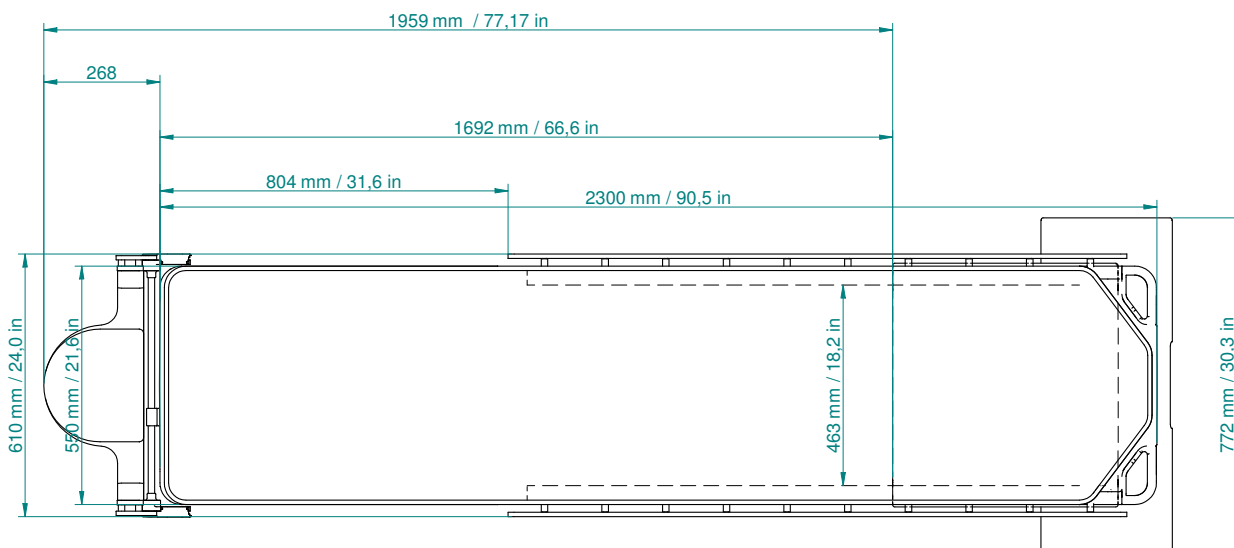

Teknisk specifikation STILLE imagiQ2™

Funktion	Beskrivning
Vikt	300 kg (eller 225 kg med Trendelenburguppgradering)
Bordstopp längd, bredd	L= 230 cm; B= 55 cm
Genomlysningsbar längd	196 cm med huvudstöd (169,2 cm utan huvudstöd)
Genomlysningsbar bordstopp	Patentskyddad, kolfiberstruktur, 0,4 mm Al
"Float" & lås	STILLE True Free Float™ och STILLE snabbblåsningssystem
Steglös "Float" (longitudinell, lateral, diagonal)	90 cm x 25 cm x 93,4 cm
Drifttillstånd	100% kontinuerlig
Strömförsörjning	Externt 100-240V växelström + batteri (likström)
Längd, bredd, höjd	L = 234 cm; B = 77,2 cm; H = 71-109 cm
Trendelenburg	±20° (med Trendelenburguppgradering ±25°)
Lateral tilt (ISO-ROLL™)	±15°
Hjul och styrning	4 st svängbara hjul
Sidoskenor	Fasta längs 2/3 av bordets längd
Avtagbar bordstopp	Ja, säkrad för framtida uppgraderingar och för transport
Transporthandtag	Ja (mörkgrå för 225 kg-version, silver för 300 kg-version)

Anpassa STILLE imagiQ2™ efter dina behov

Uppgradering	Beskrivning
Rörlighetsuppgraderingspaket Ref: 535-1711	När bordet ofta används som transport mellan olika avdelningar, nyttja uppgraderingen för ökad rörlighet. Samtliga hjul är svängbara och uppgraderingen inkluderar ett femte hjul för optimal rörlighet.
Trendelenburguppgraderingspaket Ref: 535-1713	Maximera Trendelenburg-funktionen genom att välja Trendelenburguppgradering. Bordet kan tippas i Trendelenburgposition 25 grader istället för 20 grader.



Best Surgical Imaging Table



Surgical perfection. For life.

Stille AB Ekbacken 11, SE-644 30 Torshälla, Sverige
+46 8 588 580 00 • sales@stille.se • www.stille.se