



Surgical perfection. For life.



STILLE imagiQ3™ Legacy

Un passo avanti
verso nella perfezione dell'imaging

Elevare la perfezione

con innovativa visualizzazione e efficienza in sala operatoria

Costruito su decenni di esperienza con migliaia di unità imagiQ™ in tutto il mondo, imagiQ3™ Legacy incorpora nuove tecnologie mantenendo la rinomata alta radiotrasparenza di imagiQ™ e il leggendario True Free Float™. Con un passo avanti, imagiQ3™ Legacy spinge i limiti della perfezione e rappresenta un capolavoro per le sale operatorie e i laboratori di emodinamica.

Qualità e design svedesi

I tavoli imagiQ™ di STILLE sono i migliori tavoli mobili di imaging, imitati ma mai eguagliati. Progettati con cura, offrono un comfort ottimale per il paziente, meno artefatti e una minore dose di radiazioni.



Impiego clinico versatile*



- ✓ Vascolare
- ✓ Elettrofisiologia / Ritmologia
- ✓ Pneumologia
- ✓ Colonna
- ✓ Terapia del dolore
- ✓ Gastroenterologia / ERCP

* nell'ambito d'uso previsto


Eccellenza senza pari nell'imaging. Il piano in fibra di carbonio premium curvato con bordi arrotondati offre un'eccezionale radiotrasparenza di 0,4 mm Al. Eq.*, riducendo notevolmente la dose di radiazione e migliorando la qualità dell'immagine. Sperimenta la differenza di un'imaging ad alte prestazioni.

La flessibilità nel posizionamento del paziente consente di ottenere migliori risultati di imaging in un'ampia gamma di applicazioni.

La parte anteriore del tavolo consente una capacità di peso massima di 300 kg per quelle procedure che richiedono il paziente in posizione supina, laterale o prona.

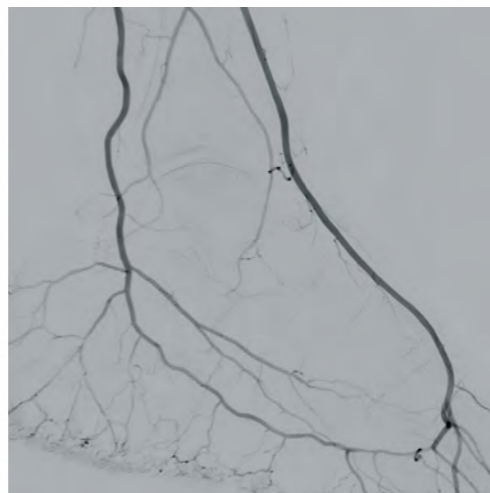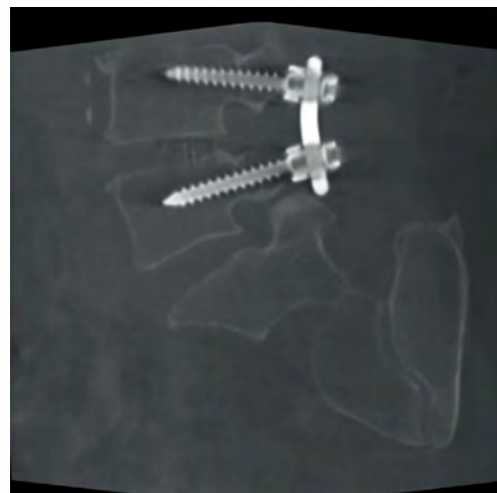

* Valore di radiolucenza per l'intero piano del tavolo, secondo la norma internazionale:
0,4 mm Al. Eq. secondo IEC 60601-1-3:1994 / 0,65 mm Al. Eq. secondo la norma IEC 60601-2-54:2022 Ed. 2.0.

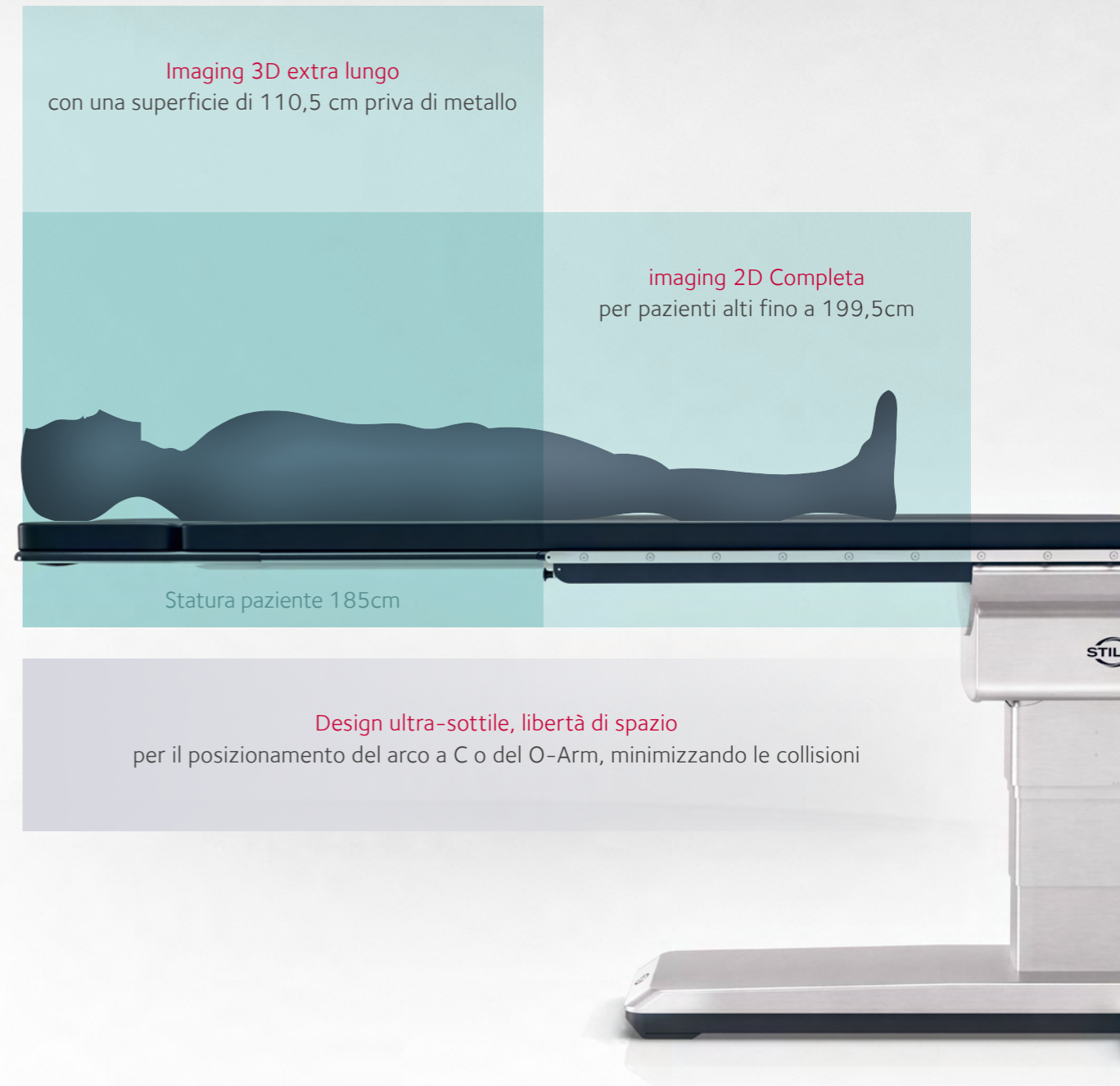

Low-Dose Enabler™, compatibile con l'arco a C

L'elevata radiolucenza del piano di lavoro, in combinazione con l'ottimo accesso per l'arco a C, migliora la qualità dell'immagine mentre i bordi arrotondati riducono gli artefatti.

Prova l'esclusivo True Free Float™, la tecnologia di flottazione più delicata e sensibile sul mercato. Il design innovativo offre una precisione sorprendente e libertà di movimento senza pari in qualsiasi direzione orizzontale, riducendo al tempo stesso la durata delle procedure e consentendo al medico un controllo assoluto.


Controllo agevolmente

La maniglia di flottazione ergonomica è come un'estensione della mano. Il medico controlla perfettamente i movimenti con sorprendente facilità, morbidezza e precisione. Il modulo di controllo integrato (opzionale), che combina True Free Float™ e funzioni di controllo manuale, aumenta ulteriormente le prestazioni. Tutto, in una mano.



Risparmia tempo intraoperatorio
muovendosi in modo rapido, delicato e fermandosi con precisione sull'anatomia di interesse.

Semplifica il flusso di lavoro
chirurgico riducendo la necessità di riposizionamento dell'arco C.

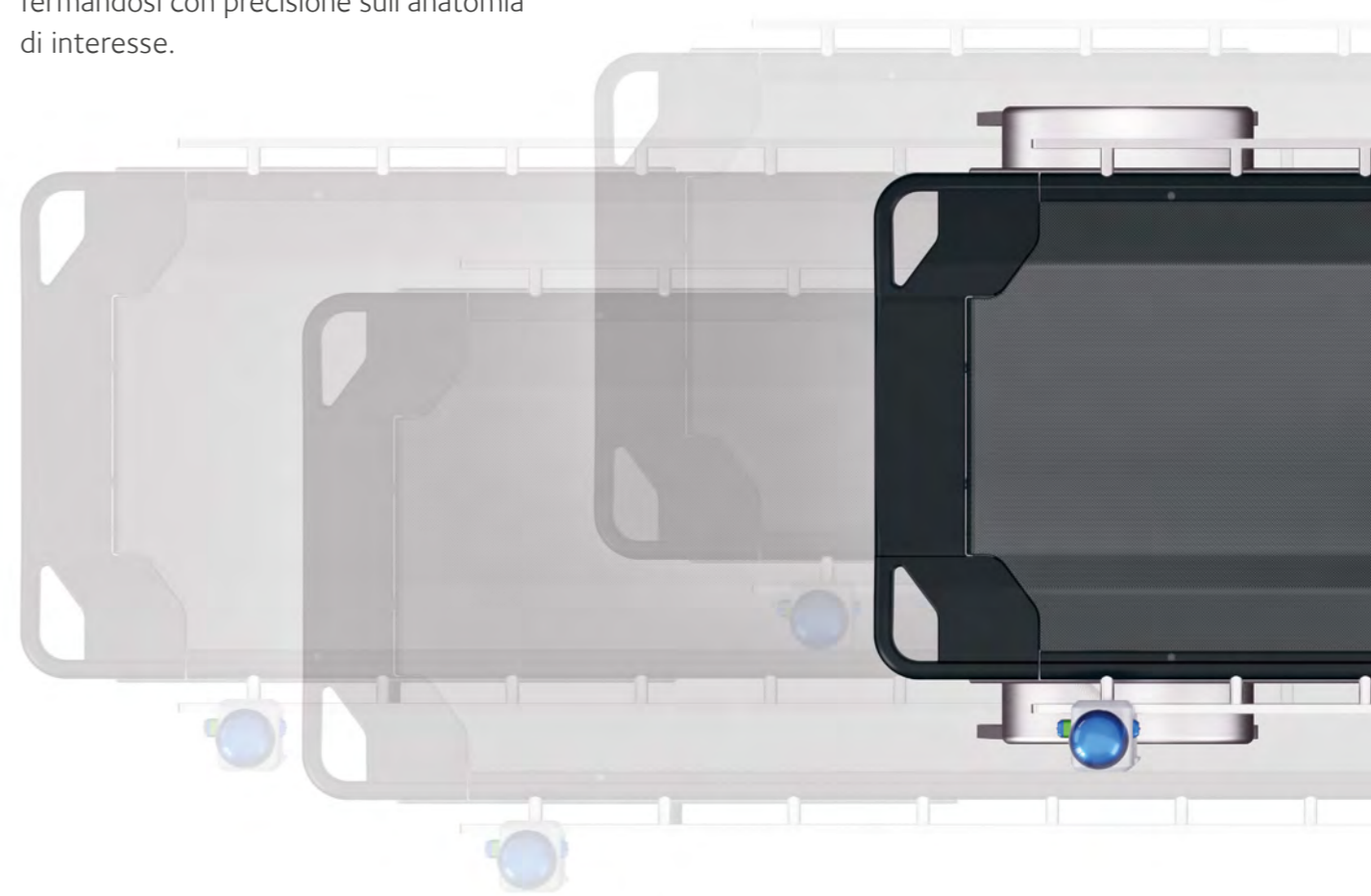

Acquisisci immagini continue dalla testa ai piedi
con l'eccezionale flottazione longitudinale di 90 cm,
25 cm flottazione laterale, 93,4 cm flottazione diagonale.

Movimenti innovativi. Con i nuovi motori elettrici, imagiQ3™ Legacy offre movimenti rapidi, morbidi e silenziosi per la regolazione dell'altezza, ISO-Roll™ brevettato, Trendelenburg aumentato e Posizione Zero. Le numerose caratteristiche di sicurezza aiutano a prevenire manovre e movimenti non sicuri. Operare con fiducia.

ISO-Roll™ Brevettato

La tecnologia brevettata ISO-Roll™ con inclinazione di 15° mantiene l'immagine focalizzata durante il riposizionamento del paziente, anche in posizione completamente inclinata. Rimanere sull'obiettivo senza dover riposizionare l'arco a C riduce l'esposizione alle radiazioni.



Elettrotecnica
per movimenti
più precisi



fino a
10 giorni

Batterie superiori per un uso prolungato

Il tavolo può essere utilizzato con alimentazione a batteria fino a 10 giorni (a seconda del modello). Dotato di batterie al litio a ricarica rapida, è sempre pronto all'uso anche durante la ricarica.



40 (dB)*

Movimenti silenziosi per una migliore concentrazione

I movimenti morbidi e silenziosi di imagiQ3™ Legacy contribuiscono a creare un ambiente migliore, facilitando la concentrazione del personale in sala operatoria.

*stima effettuata su uso normale



**10+
funzioni**

Controllo manuale robusto con funzioni di sicurezza

Robusto e semplice, il controllo manuale retroilluminato include un Indicatore di Posizione Sicura e un pulsante rapido Trendelenburg per le emergenze, completando le funzionalità di sicurezza del tavolo.



Ampio Trendelenburg

Anche con una capacità di carico di 300 kg, imagiQ3™ Legacy offre 25° Trendelenburg e 21° Trendelenburg inversa.

Progettato per durare. L'imagiQ3™ Legacy dispone di parti intelligenti e caratteristiche avanzate, come l'integrazione dei servizi che rende più facile e veloce mantenere e riparare. Con la sua alta qualità, il tavolo assicura un perfetto flusso di lavoro senza stress per il personale clinico e il team biomedico.



Qualità premium

Innovativi tavoli operatori progettati e prodotti in Svezia dal 1841, STILLE assicura sempre un design affidabile e ingegnoso, dalle guide laterali in acciaio inossidabile estremamente robuste alla fibra di carbonio brevettata fino alle tecnologie integrate.



Lunga garanzia

Poiché una garanzia significativa dice molto della eccellente durata dei tavoli, imagiQ3™ Legacy è coperto da 4 anni di garanzia sulle parti (UE/RoW esteso).



Il nostro impegno

Creato con un approccio sostenibile, imagiQ3™ Legacy consente il riutilizzo della maggior parte degli accessori imagiQ2™. Include una batteria con durata tecnica più lunga e cavi universali con connettori plug-and-play.



Contatta direttamente il nostro team di supporto.



Concediti l'accesso temporaneo al tavolo tramite l'app Service Integration



Ottieni un'analisi rapida e ricerca soluzioni

Risparmia tempo e denaro con un servizio e una riparazione ancora migliori


Collega il tuo tavolo con la rivoluzionaria funzione di integrazione dei servizi. Monitora la condizione del tavolo e lascia che i nostri ingegneri ti assistano con la risoluzione dei problemi a distanza senza indugio. Questa tecnologia innovativa può ridurre in modo significativo la necessità di diagnosi e riparazioni in loco. Semplice da usare, basta collegare il tavolo con uno smartphone tramite un accesso Bluetooth sicuro.

Codice QR per un rapido accesso alla pagina di supporto

E' sufficiente scansionare il codice QR con uno smartphone e accedere alle informazioni della pagina di supporto - inclusi numero di serie, numeri di parti, risorse multimediali e azioni della pagina di supporto per segnalare un problema.



La perfezione è una questione di dettagli. Scopri la potenza di imagiQ3™ Legacy.

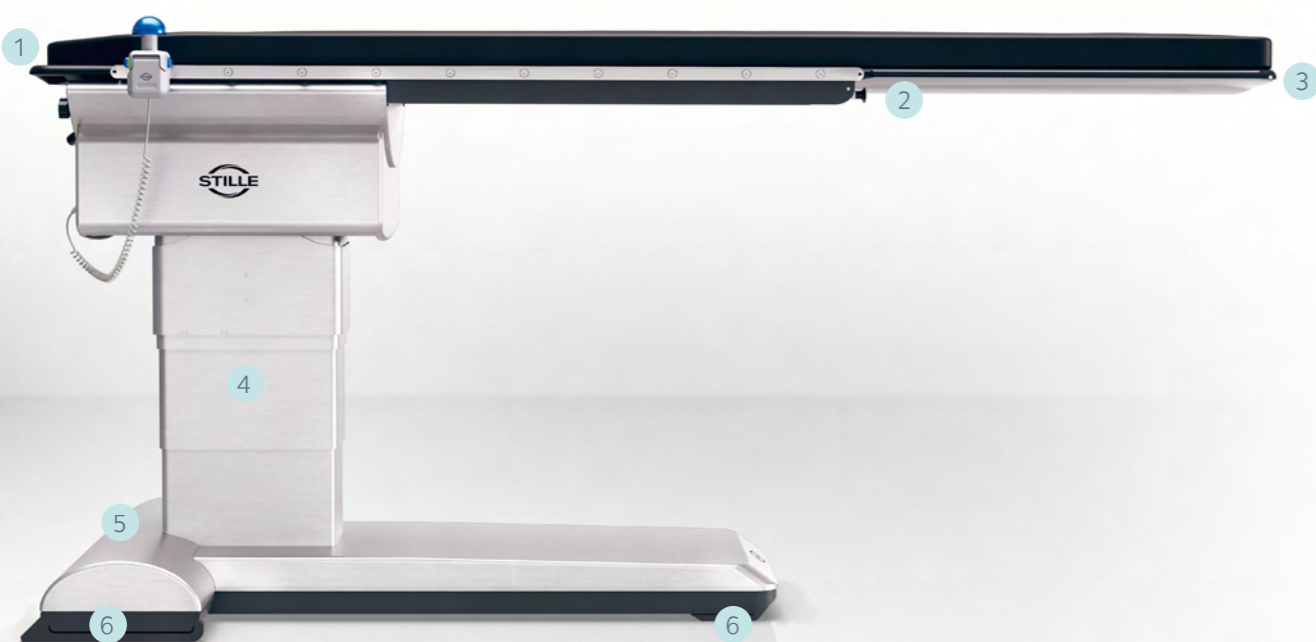

1. **6 cm di spessore
materasso comfort**

con proprietà antistatiche
e scarico della pressione

4. **Rivestimento colonna
in acciaio inossidabile**

igienico e altamente resistente,
il migliore della categoria per la
resistenza alla compressione e
alla flessione

2. **Guide laterali in
acciaio inossidabile**

meno soggetti a danni
rispetto alle guide laterali
in fibra di carbonio

5. **Rivestimento
controlli emergenza**

per maggiore sicurezza:
controllo manuale di riserva
e regolazione manuale
posizione Trend / CPR

3. **Piano del tavolo in fibra
di carbonio curvato**

garantire comfort, stabilità e
riduzione della dose di raggi X

6. **Quattro ruote
girevoli retrattili**

parcheggiare il tavolo sulla
propria base per una stabilità
ottimale, permettendo CPR
e chirurgia open

		imagiQ3™ Legacy
Codice	EU/RoW, 2-modello batteria EU/RoW, 3-modello batteria	550-1702 550-1703
Piano del Tavolo	lunghezza larghezza lunghezza radiolucente con estensione 3D senza estensione Lunghezza d'immagine 360° con estensione 3D senza estensione sostituibile	240 cm 55 cm 199,5 cm 169,5 cm 110,5 cm 80,5 cm ✓
True Free Float™	longitudinale laterale diagonale blocco flottazione	90 cm 25 cm 93,4 cm Sistema di bloccaggio rapido STILLE
Movimenti motorizzati	regolazione altezza Trendelenburg ISO-Roll™	71-109 cm +25° / -21° +15° / -15°
Carico di lavoro sicuro	in qualsiasi posizione del tavolo paziente alla fine dell'estremità 3 paziente all'estremità opposta 1	300 kg 150 kg
Guide laterali	fisse e standardizzate	142,5 cm
Dimensioni tavolo	lunghezza larghezza altezza	240 cm 77,2 cm 71-109 cm
Trasporto	ruote e sterzo maniglie di trasporto trasporto paziente	4 ruote retrattili e girevoli ✓ ✓
Sorgente alimentazione	100-250 Volts alimentazione diretta CA Li-ion batteria DC potenza	✓ ✓
Garanzia	EU/RoW, standard EU/RoW, estesa	2 anni su parti e manodopera 4 anni sulle parti, 2 anni sulla manodopera



Mantenere il meglio, migliorare il resto. Risparmia utilizzando nuovamente gli accessori imagiQ2™ o quelli montati su guida laterale. Il catalogo degli accessori imagiQ3™ Legacy è disponibile per personalizzare il vostro tavolo.

STILLE – Surgical perfection. For life.

Stille è una delle più antiche aziende di dispositivi medici al mondo, con oltre 180 anni di esperienza. In STILLE sviluppiamo, produciamo e vendiamo strumenti chirurgici e tavoli chirurgici per medici di tutto il mondo.

Tavoli Chirurgici

Offriamo speciali tavoli per procedure minimamente invasive, con prezzi, sicurezza e caratteristiche ottimizzate sia per ambienti ospedalieri che ambulatoriali.

I tavoli mobili per imaging chirurgica STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l'efficienza in sala operatoria, offrendo allo stesso tempo soluzioni di valore con qualità e affidabilità.

Il tavolo di imaging chirurgica STILLE imagiQ3™, con funzionalità a bassa radiazione, è ottimizzato per la Sala operatoria ibrida, oltreché per procedure periferiche e interventistiche.

Strumenti Chirurgici

Offriamo una gamma completa di strumenti forgiati e fatti a mano per tutti i campi della chirurgia aperta, con particolare attenzione alla chirurgia cardiovascolare, plastica ricostruttiva ed estetica.

I nostri strumenti vantano un design delicato, una durata leader nel settore e una sensazione unica che ha reso STILLE un fornitore noto e altamente rispettato dai chirurghi di tutto il mondo.

Scopri di più su www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30 Torshälla
Svezia

☎ +46 8 588 580 00

✉ sales@stille.se

🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
U.S.A.

☎ 1.800.665.1614

✉ sales.us@stille.se

🌐 www.stille.se/us



Surgical perfection. For life.



I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte i Paesi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di mercato, rivolgersi al proprio rappresentante STILLE. Questo documento descrive correttamente i dispositivi al momento della stampa del documento. Per eventuali modifiche, consultare sempre il manuale d'uso. Le immagini dei prodotti mostrati sono a scopo illustrativo e potrebbero non essere rappresentazione esatta del prodotto.

Le dimensioni descritte in questo documento possono variare con una tolleranza di $\pm 2,0^\circ$ per gli angoli, $\pm 1,25$ cm per le lunghezze.