



Surgical perfection. For life.



STILLE imagiQ3™ Legacy

Ta ett steg närmare bildperfektion
Step further into imaging perfection

Kompromisslös perfektion

med total visualisering och effektivitet i operationssalen

imagiQ™-enheterna bygger på flera årtionden av erfarenhet och används världen över. imagiQ3™ Legacy använder toppmodern teknik som kombinerats med imagiQ™-bordens höga radiolucens och legendariska True Free Float™. imagiQ3™ Legacy ligger steget före och vidgar gränserna för perfektion – enkelt uttryckt är det ett mästerverk i operationssalar och undersökningsrum.

Svensk kvalitet och design

STILLE imagiQ™ är det bästa mobila bordet för bildbehandlingsavdelningen som skapats – det har ofta imiterats, men aldrig matchats. Dessa precisionstillverkade bord ger optimal patientkomfort, har färre bildartefakter och kräver mindre röntgendoser.



Mångsidig klinisk användning*




- ✓ Vaskulär
- ✓ Elektrofysiologi /rytmologi
- ✓ Lungsjukdomar
- ✓ Rygggrad
- ✓ Gastroenterologi /ERCP

* inom avsett bruk


Oöverträffat hjälpmedel för bildbehandling. Det svagt kurvformade premium kolfiberunderlaget med sina avrundade kanter ger enastående radiolucens med blygsamma 0,4 mm Al. Eq.*, vilket reducerar den nödvändiga stråldosen avsevärt samtidigt som bildkvaliteten förbättras. Upplev högpresterande bildbehandling när den är som bäst.

Flexibel patientpositionering som ger bästa möjliga bildresultat i vitt skilda tillämpningar.

Bordets främre del har en maximal belastningsvikt på hela 300 kg för procedurer med total frihet vid positionering av patienten på ryggen, sidan eller magen.

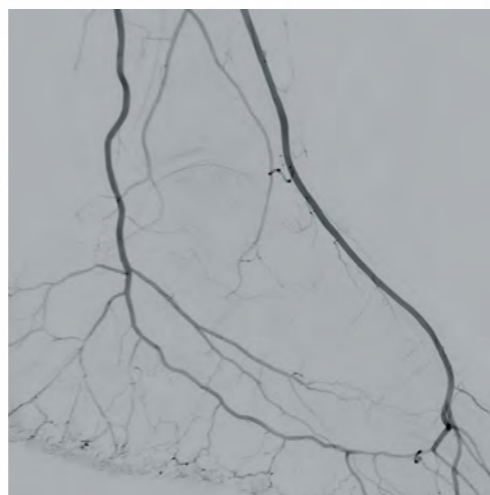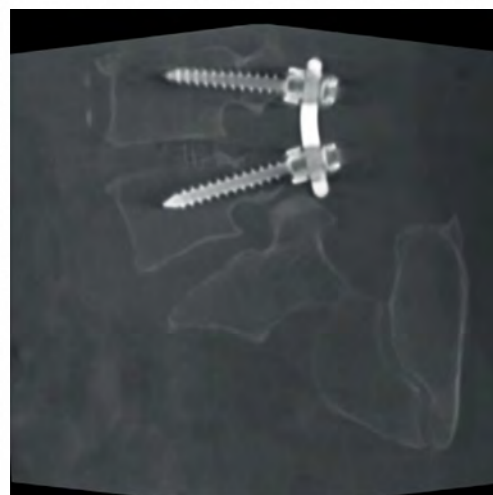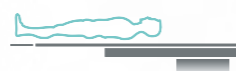

* Radiolucensvärde för hela kolfiber bordsskivan enligt internationell standard:
0,4 mm Al. Eq. enligt IEC 60601-1-3:1994 / 0,65 mm Al. Eq. enligt IEC 60601-2-54:2022 Ed. 2.0.

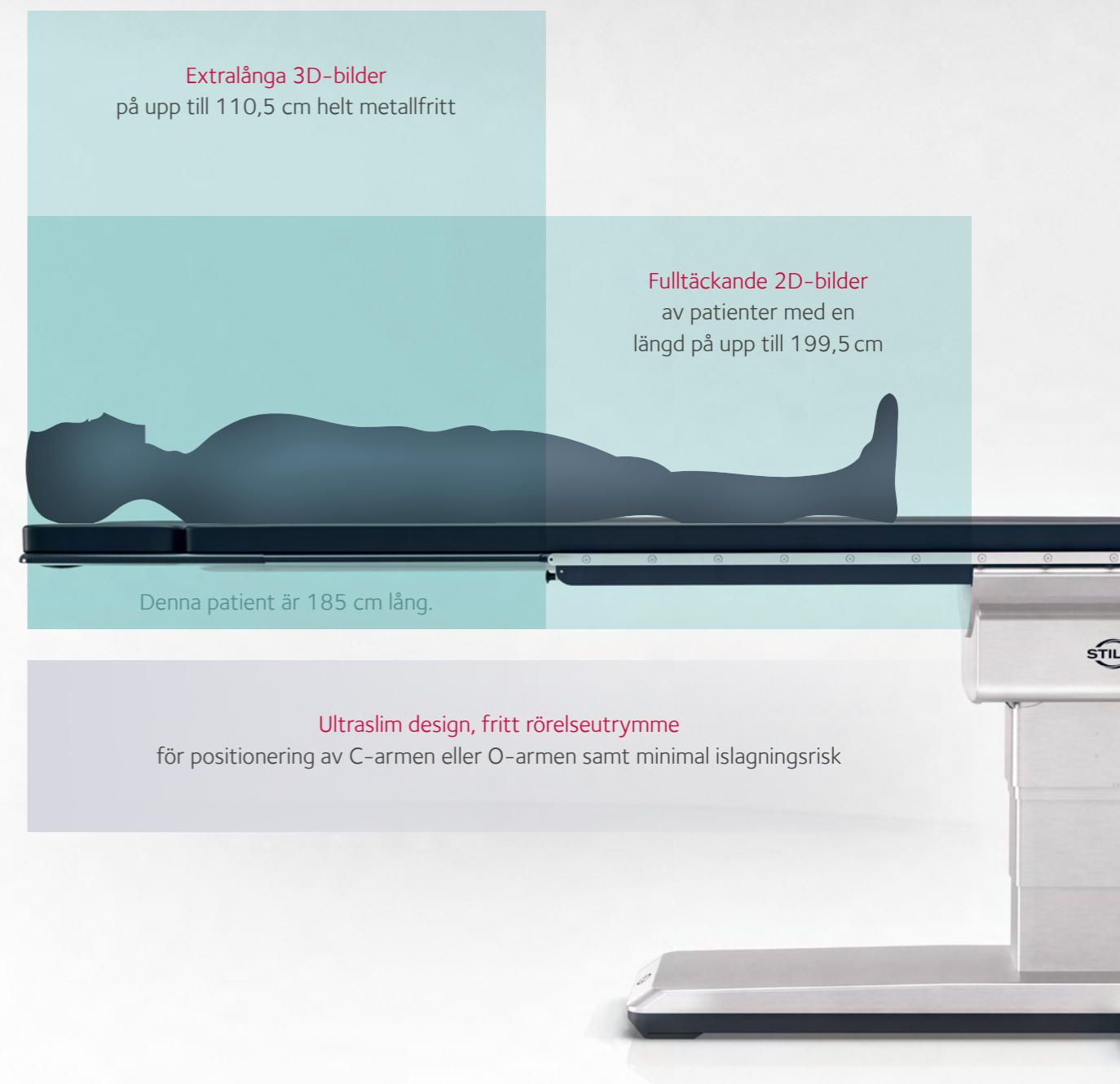

Low-Dose Enabler™, optimal C-armplacering

Bordsskivans höga translucens och enkel åtkomst till C-armen bidrar till bättre bilder samtidigt som bordets avrundade kanter minimerar eventuella bildartefakter.

Unik True Free Float™, bjuder på marknadens smidigaste och mest responsiva flytande upphängningsteknik. Den banbrytande designen ger oerhörd precision och stor rörelsefrihet i alla horisontella riktningar samtidigt som behandlingstiderna förkortas och den behandlande läkaren får bättre kontroll.

Total inställningskontroll

Det ergonomiska inställningshandtaget fungerar som en förlängning av din hand. Den behandlande läkaren kan lätt och smidigt och med stor precision ställa in bordet i exakt rätt läge. Med tillvalet Integrerad styrmodul får man ännu större kontroll tack vare kombinationen av True Free Float™ med det smidiga enkelgreppsreglaget. Allting utförs med ett enkelgreppshandtag.




Spara tid under behandlingar

genom att kunna utföra rörelser snabbt och smidigt samt att exakt kunna stanna vid och fokusera på den intressanta kroppsdel.

Det kirurgiska arbetsflödet förenklas

genom att begränsa behovet för ompositionering av C-arm i olika riktningar.

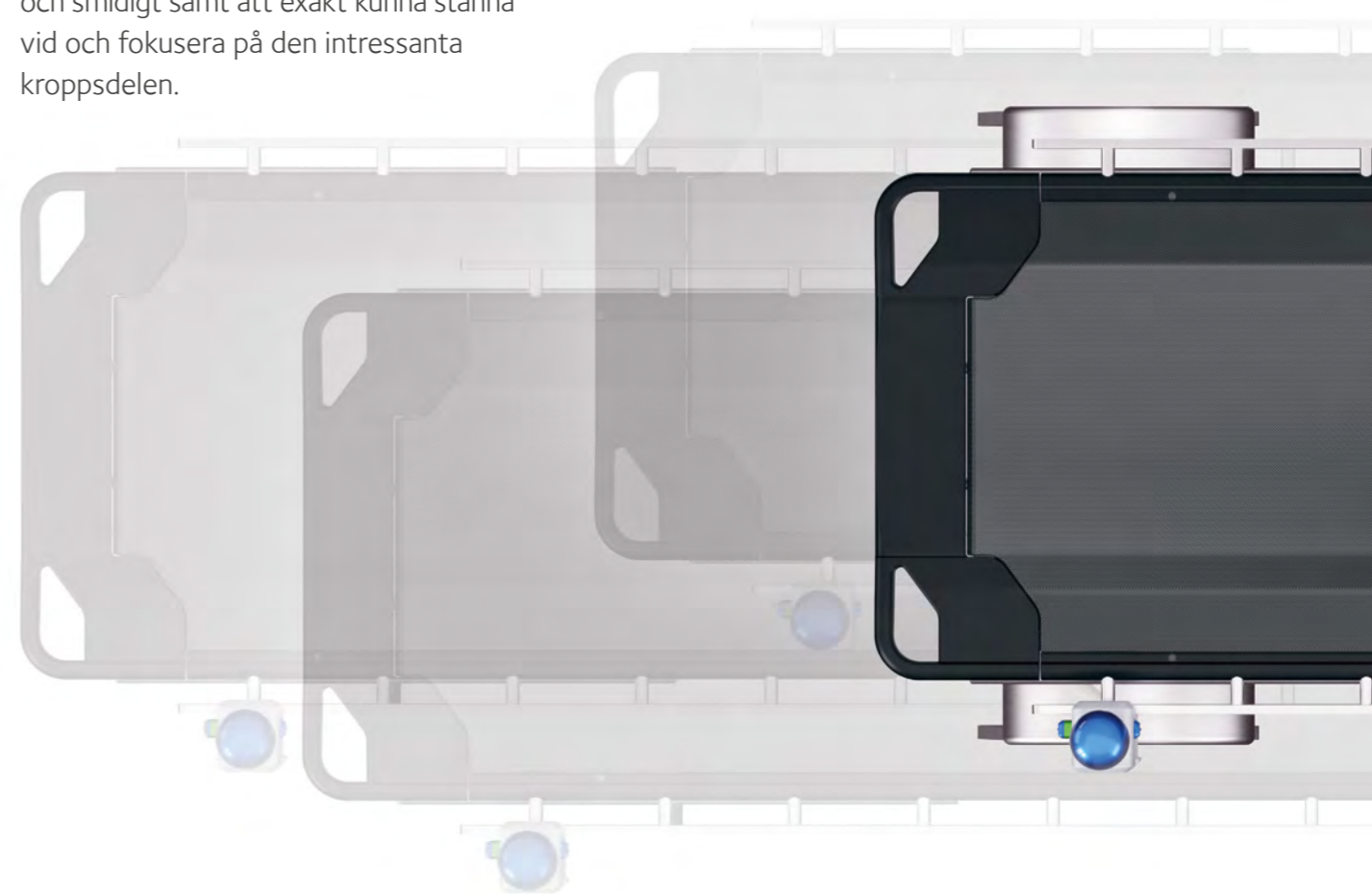

Ta kontinuerliga bilder från topp till tå

med bordets unika flytande bordstop som tillåter exakt justering på upp till 90 cm i längsled, 25 cm i sidled och 93,4 cm i diagonalriktning.

Innovativa rörelser. imagiQ3™ Legacy använder toppmoderna elektromotorer som ger snabba, smidiga och tysta rörelser vid höjdjustering av bordet. Och vår patenterade ISO-Roll™ ger bättre kontroll över Trendelenburg- och nollägesplacering av patienten. Bordet har flera olika säkerhetsfunktioner som förhindrar felhantering och osäkra rörelser. Manövrerbarhet man kan lita på.

Patenterad ISO-Roll™

Den patenterade tekniken med ISO-Roll™ och en $\pm 15^\circ$ vagna bibehåller bildfokus vid ompositionering av patienten även när bordet är helt lutat sidledes. Tack vare att bildfokus kan behållas utan att behöva justera C-armen reducerar man även strålningsexponeringen.



Elektroteknik
för mer exakta
rörelser



upp till
10 dagar

Strömstarka batterier för längre användning

Bordet kan drivas helt på batteri i upp till 10 dagar (beroende på modell). Det har funktion för snabbbladning av litiumbatterier och kan användas även när det laddas.



40 (dB)*

Tysta rörelser ger bättre fokus

imagiQ3™ Legacy's tysta och mjuka rörelser bidrar till en bättre miljö och gör att vårdpersonalen i operationsalen bättre kan koncentrera sig på sina uppgifter.
*genomsnitt baserat på normal användning



**10+
funktioner**

Stadigt handreglage med säkerhetsfunktioner

Det stadiga och förenklade handreglaget har inbyggd belysning och är utrustat med en indikator för säker position och en snabbvalsknapp för Trendelenburgpositionering i nödlägen, vilket kompletterar bordets säkerhetsfunktioner.



Extrem Trendelenburg

Med en lastkapacitet på 300 kg ger imagiQ3™ Legacy 25° Trendelenburg och 21° omvänd Trendelenburg.

Konstruerat för att hålla länge. imagiQ3™ Legacy använder komponenter med smart design och avancerade egenskaper såsom Serviceintegration, som förenklar och snabbar på underhållet och eventuell reparation. Bordets höga kvalitet säkerställer ett sömlöst och stressfritt arbetsflöde för både vårdpersonalen och det biomedicinska teamet.



Premiumkvalitet

STILLE marknadsför innovativa operationsbord designade och tillverkade i Sverige sedan 1841 med en genialisk och pålitlig design samt smarta lösningar från extremt tåliga, rostfria sidoskenor till en patentskyddad kolfibertechnik och avancerade tekniska detaljer.



Lång garanti

Garantiåtagandet reflekterar imagiQ3™ Legacy-bordens höga kvalitet och garanterar produkten under 4 år tillval i EU och andra länder.



Vårt ansvar

Stilles tillverkningsprocesser bygger på ett hållbarhetskoncept där imagiQ3™ Legacy-borden kan återanvända de flesta av imagiQ2™-tillbehören. Batteriet i bordet har exempelvis en förlängd teknisk livslängd, medan kopplingarna använder universalkablar med plug-and-play-kontakter.



Direktkontakt med vårt supportteam



Ge tillfällig åtkomst till bordet via appen Service Integration



Få en snabb analys och förslag på lösningar

Spara tid och pengar med ännu bättre service och snabb reparation


Koppla upp ditt bord via den revolutionerande funktionen Serviceintegration. Bordets skick kan då fjärrövervakas av våra ingenjörer, som hjälper dig med omedelbar felsökning vid eventuella problem. Denna innovativa teknik kan avsevärt minska behovet för kostsam felsökning och reparation på plats. Tekniken är enkel använda: anslut bara bordet till en smartphone via säker Bluetooth-parning.

QR-kod ger snabb åtkomst till supportsidan

Skanna helt enkelt QR-koden med en smartphone för att få tillgång till informationen på våra supportsidor – inklusive serienummer, artikelnummer, mediareсурser för borden samt tillgång till åtgärder för att rapportera ett problem.



Perfektion handlar om små, men viktiga detaljer. Utforska kvaliteten i imagiQ3™ Legacy.

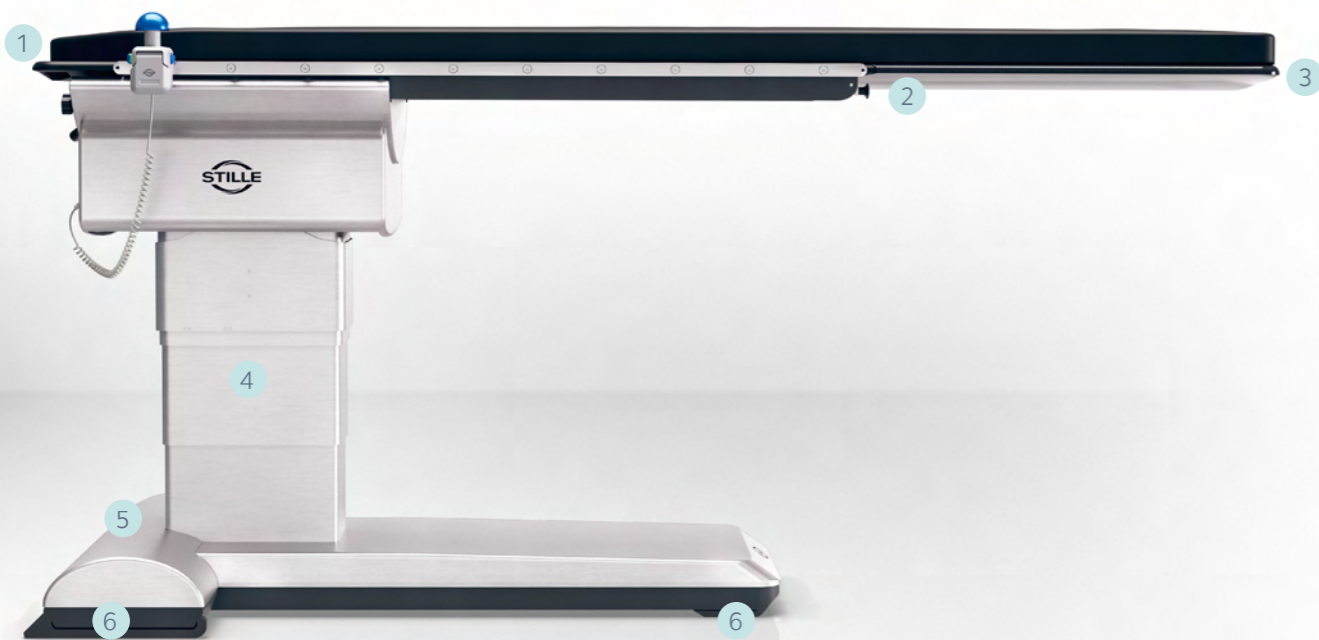

1. 6 cm tjock komfortmadrass

med tryckavlastning och antistatiska egenskaper

2. Sidoskenor i rostfritt stål

minskar skaderisken jämfört med kolfiberskenor

3. Svagt kurvig bordsskiva i kolfiber

säkerställer hög komfort och god stabilitet samtidigt som röntgendosen kan reduceras

4. Pelarskydd i rostfritt stål

för god hygien och hög tålighet, bäst på marknaden vad gäller tryck och böjhallfasthet

5. Alltid redo i viktiga situationer

med extra säkerhet: extra handreglage och manuell Trend-/HLR-positionering

6. Fyra svängbara, infällbara hjul

gör att bordet kan parkeras på sin bas för optimal stabilitet, vilket möjliggör HLR och öppen kirurgi

		imagiQ3™ Legacy
Artikelnummer	EU / andra länder, modell med 2 batterier EU / andra länder, modell med 3 batterier	550 - 1702 550 - 1703
Bordsskiva	längd bredd radiolucent längd med 3D-förlängning utan förlängning 360° bildtagning längd med 3D-förlängning utan förlängning utbytbar	240 cm 55 cm 199,5 cm 169,5 cm 110,5 cm 80,5 cm ✓
True Free Float™	längsled sidled diagonalt låsnings av flytläge	90 cm 25 cm 93,4 cm STILLE snabbblåssystem
Motoriserade rörelser	höjjustering Trendelenburg ISO-Roll™	71 - 109 cm +25° / -21° +15° / -15°
Säker arbetsbelastning i valfri bordsposition	patienten vid bordets huvudände 3 patienten vid bordets bakre ände 1	300 kg 150 kg
Sidoskenor	patienten vid bordets bakre ände	142,5 cm
Bordets mått	längd bredd höjd	240 cm 77,2 cm 71 - 109 cm
Transport	hjul och styrning transporthandtag patienttransport	4 infällbara och svängbara hjul ✓ ✓
Strömkälla 100-250 volt	direkt växelström Li-ion-batteri, likström	✓ ✓
Garanti	EU / andra länder, standard EU / andra länder, utökad	2 år på utfört arbete och delar 4 år på delar, 2 år på utfört arbete



Endast det bästa och förbättring av resten. Spara på dina utgifter genom återanvändning av imagiQ2™-tillbehören och sidoskenorna. Tillbehörskatalogen för imagiQ3™ finns tillgänglig för total anpassning av ditt bord.

STILLE – Surgical perfection. For life.

STILLE är ett av världens äldsta medicintekniska företag med över 180 års erfarenhet. STILLE utvecklar, producerar och säljer kirurgiska instrument och operationsbord till läkare över hela världen.

Operationsbord

Vi erbjuder specialbord för minimalt invasiva ingrepp med optimerad säkerhet och funktioner för både sjukhusvård och öppenvård.

STILLE Medstone mobila bildbehandlingsbord bidrar till att öka effektiviteten i operationssalen, samtidigt som de representerar prisvärda lösningar med både hög kvalitet och stor tillförlitlighet.

STILLE imagiQ3™ bildtaggningsbord med dess låg-dosprestanda är optimerade för avancerade mobila hybridlösningar i operationssalar och relaterade interventionella procedurer.

Kirurgiska instrument

Vi saluför ett komplett utbud av handgjorda, smidda instrument för alla typer av kirurgiska ingrepp, särskilt i samband med kardiovaskulär kirurgi, rekonstruktiv kirurgi och estetisk plastkirurgi.

Våra instrument är precisionstillverkade med branschledande hållbarhet och fackmanskänsla, vilket har gjort STILLE till en välkänd och mycket välrenommerad leverantör bland kirurger över hela världen.

Läs mer på www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30 Torshälla
Sverige
☎ +46 8 588 580 00
✉ sales@stille.se
🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
☎ 1.800.665.1614
✉ sales.us@stille.se
🌐 www.stille.se/us



Surgical perfection. For life.



Dessa produkter kanske inte är tillgängliga i alla regioner. Kontakta din STILLE-representant för mer information om tillgänglighet på din marknad. Detta dokument ger en korrekt beskrivning av enheterna vid publiceringen. Rådgör alltid med bruksanvisningen för eventuella produktändringar. Produktbilderna i detta dokument används endast i illustrationssyfte och kan avvika från den faktiska produkten.

Måtten som anges i detta dokument kan variera med $\pm 2,0^\circ$ för vinklar samt med $\pm 1,25$ cm för längdmått.